

#6. 主成分スコアの信頼橿円 (JMP 15 の新機能)


「JMP 15」では、主成分スコアに対する確率橿円を表示する機能が追加されました。確率橿円の外側に位置するサンプルは外れ値、または規格外のサンプルであると考えることができます。

■操作:スコアプロットに確率橿円を表示、橿円の大きさを設定

主成分分析のレポート左にある赤い三角ボタンから【スコアに対する橿円】を選択します。

(その前に【橿円の大きさ】を選択することにより、確率(信頼水準)、またはkシグマの水準を指定できます。)

デフォルトの設定では、下図のように95%信頼橿円を描きます。

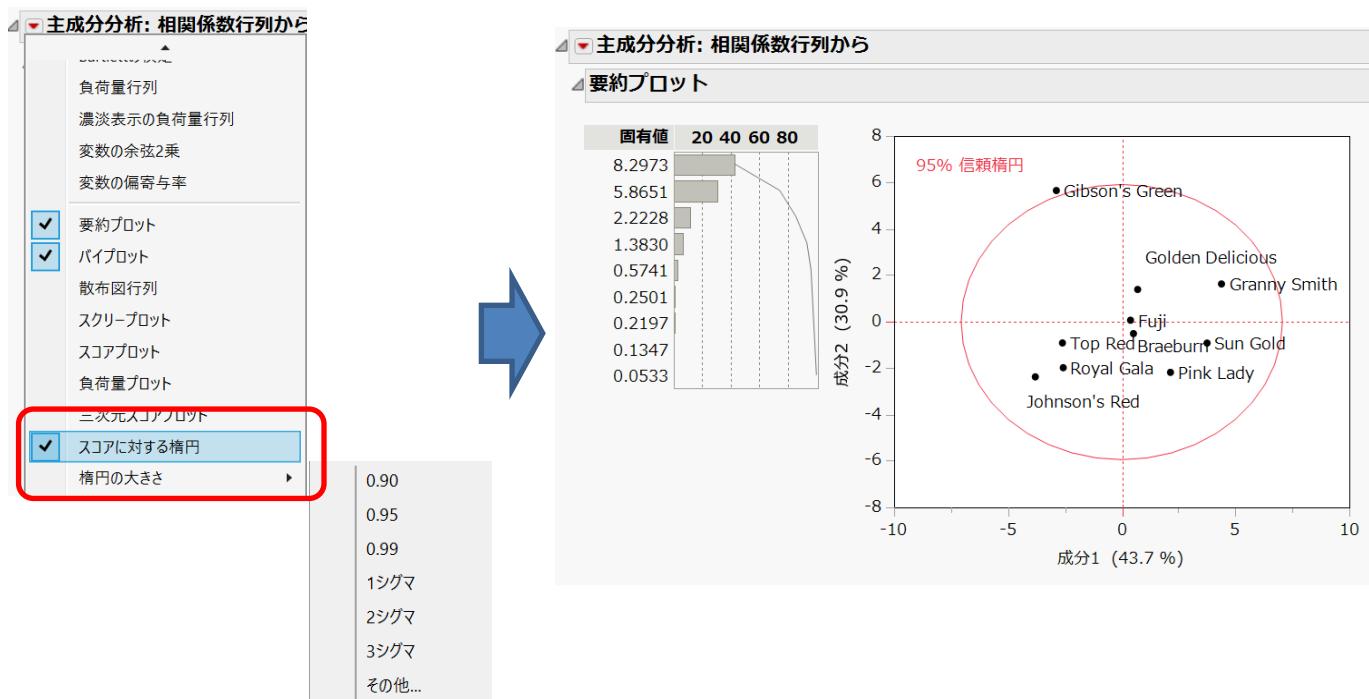

注意:上記の確率橿円は、「要約プロット」に表示されるスコアプロットのみに表示することができ、赤い三角ボタンから選択する【スコアプロット】では表示することができません。